

速い。安い。高機能。を非接触で実現。



T.K.K.2952 非接触型眼球運動測定装置

TalkEye Free

1 速い

較正時間は最短1分

2 安い

¥800,000 (税抜)

3 高機能

60Hz、タキスト機能付

4 ストレスフリー

非接触でより自然に

- 視対象をディスプレイに限定した眼球運動装置です(静止画 & 動画)。
- 対象物の評価など、グラスをかけないので、より自然な状態で測定可能です。
- 検出部は、小型・軽量。三脚だけでなく、ディスプレイに直接貼り付け可能です。



TalkEye Free 実験風景



金属プレートを両面テープでディスプレイに留め、本体のマグネットと吸着させるので、着脱が簡単です。

オプション

- ・ 処理部PC ノート型 Windows10
- ・ 刺激表示モニタ リフレッシュレート60Hz対応
- ・ ビデオコンバータ 手持ち動画取り込み用

仕様

検出方式	瞳孔角膜反射画像処理方式(暗瞳孔法)
検出部形態	スティック状非接触トラッキングデバイス 両眼
検出部照明光	近赤外線、波長850nm
サンプリング周波数	最大 60Hz
カメラ設置距離	400mm ~ 600mm
設置方法	三脚 or 貼り付け
検出部寸法	約200(W) × 30(D) × 24(H)mm (レンズ含まず)
検出部電源	USB経由PCより供給
ケーブル長	約2.5m

60Hzで取れる、**非接触** タイプ。

瞳孔径の計測もできます。

もちろん、*Made in Japan*



アフターフォローも迅速、特注対応も可能です。

T.K.K.2952

非接触型眼球運動測定装置

TalkEye Free




定価 ¥ 800,000 (税抜)

Check point 1

キャリブレーションは最短1分!

- TalkEye Freeのキャリブレーションシステムは、校正点を、2点 or 5点 or 9点で校正。
- 四隅の検出も高精度。

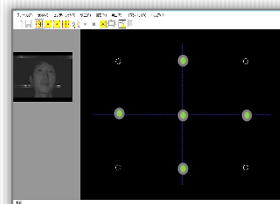

Check point 2

いつでもどこでも!

- 検出装置は小型・軽量。研究室でも、自宅でも、現場(室内のみ)でも、いつでもどこでも使用可能。

Check point 3

映像と同時に音声も記録!

- 従来の映像、眼球軌跡だけでなく、音声も同時に記録可能。
- 解析動画を見ながら、見たい視線座標のカラムNoを容易に見つける事が可能。



好きな飲み物を
探してください

Check point 4

多彩な刺激呈示機能!

- 静止画：60Hz 表示する刺激画像の順番やインターバル時間を刺激パターンとして作成可能。
- 動画：60Hz or 動画のフレームレートに自動同期可能。 動画ファイル、外部映像を呈示可能。

Check point 5

解析ソフトも充実!

① 再生プログラム以外はオプション

- ① 再生プログラム(プレインストール) 視野動画、静止画(タキスト機能で呈示した静止画も可)を再生しながら、視線の軌跡注視点をオーバーレイ表示。
- ② 動画解析プログラム 視野映像と視線測定データをもとに、対象物(任意画像10個まで)を覚えさせ、対象物が移動したとしても追従し、どの程度見ていたかを解析。注視時間を円 or ヒートマップで表示。注視の順番も確認可能。
- ③ 任意領域解析処理プログラム 静止画刺激呈示の任意に指定した領域内の軌跡、注視時間、統計値の解析・表示。

おすすめ

★ 自動的に対象物を見た時間を解析する為、格段に処理時間が短縮します ★

人間の可能性を科学する
竹井機器工業株式会社

ホームページ [HTTP://www.takei-si.co.jp](http://www.takei-si.co.jp)

仙台支店	〒984-0051	仙台市若林区新寺 1-7-21 新寺KSビル7F	TEL 022-291-2765	FAX 022-291-6364
新潟支店	〒956-0113	新潟市秋葉区矢代田619	TEL 0250-38-4132	FAX 0250-61-1211
東京支店	〒142-0064	東京都品川区旗の台 1-6-18	TEL 03-3786-4111	FAX 03-3787-8673
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル4F	TEL 052-264-9201	FAX 052-263-9345
大阪支店	〒532-0001	大阪市淀川区西中島6-7-8 大昭ビル7F	TEL 06-6304-6015	FAX 06-6304-1538
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル7F	TEL 092-411-1430	FAX 092-475-3899
貿易部	〒956-0113	新潟市秋葉区矢代田619	TEL 0250-38-3470	FAX 0250-61-1211
本社	〒956-0113	新潟市秋葉区矢代田619	TEL 0250-38-4131	FAX 0250-61-1211